



PRODUCTS

➞ **AIR POLISHING**
COMBI touch



→ COMBI *touch* ALL IN ONE

PIEZO 방식의 SCALER & 2 CHAMBER AIR-POLISHING

전 세계 최초로 PIEZO 방식을 적용한 SCALER와 다양한 TIP 솔루션을 제공하는 ITALY MECTRON社의 AIR-POLISHING SYSTEM!

MECTRON의 기술력이 고스란히 담겨 완성된 COMBI touch는 그 누구도 흉내낼 수 없는 독보적인 AIR-POLISHING을 탑재하였으며, 2~3분 사이에 쉽고 빠르게 바이오필름 제거가 가능합니다. 또한 환자의 가장 큰 두려움의 대상인 통증을 거의 느끼지 않으면서 편안하고 완벽한 진료가 가능하게 합니다. 아프지 않은 “NO PAIN 스케일러 COMBI touch”

예방치료 장비의 새로운 진화 MECTRON COMI touch

❖ 멀티 기능의 PROPHYLAXIS 장비

- 두 가지 타입의 파우더를 동시에 사용 가능한 강력한 AIR-POLISHING과 부드럽고 파워풀한 ULTRASOUNDS 탑재

❖ 50여 종의 다양한 SCALER INSERTS

- MECTRON이 제공하는 50여 종의 다양한 TIP (동종사 대비 세계 최대)

❖ 두가지 파우더를 터치 한번으로!

- SUPRAGINGIVAL 클리닝을 위한 PROPHYLAXIS POWDER와 SUBGINGIVAL BIOFILM 제거에 최적화된 PROPHYLAXIS POWDER SMOOTH를 동시에 사용

❖ 공급수 히팅 시스템

- 따뜻한 물 사용이 가능하여 환자에게 최적의 안락감 제공





► PROPHY POWDER CHAMBER

PROPHYLAXIS POWDER (Sodium Bicarbonate)

► PERIO POWDER CHAMBER

PROPHYLAXIS POWDER SMOOTH
(Calcium Carbonate)

► SUPRA AND SUBGINGIVAL

클릭 한번으로 PROPHY 또는 PERIO 전환 가능
(Only Mectron Combi touch)

► LED HANDPIECE

PIEZO 방식의 360° 회전 가능한
LED 핸드피스

► ERGONOMIC TOUCH PANEL

세척과 감염관리에 용이한 인체공학적
GLASS 터치 패널로 모든 기능이 빠르게
조작 가능

► CLOGGING PROTECTION

MECTRON만의 특허받은 ANTI-CLOGGING System (막힘방지)

으로 대기모드에서도 튜빙내로 지속적인 SOFT AIR FLOW를 발생시켜
파우더 막힘에 의한 문제 해결

► REFILL FUNCTION

장비의 전원을 끄지않고 파우더 리필
및 클리닝 가능

► IRRIGATION SYSTEM

초음파 스케일러용 2WAY 물 공급 라인
(Tap water 또는 500ml bottle 선택)

► SOFT MODE

MECTRON만의 특허받은 ULTRA SOFT
SCALING 가능

(민감한 환자도 고통없이 편안하게 치료)



▶ 3 DIFFERENT NOZZLES

최상의 접근성 : 시술 부위에 따른 3가지 각도의 90° 및 120° NOZZLES.

특수 제작된 일회용 SUBGINGIVAL PERIO TIP 사용 시, 5mm의 깊은 포켓까지 최적의 접근성을 제공합니다.
또한 3가지 NOZZLES은 퀵 커넥팅 체결 방식으로 핸드피스의 교체없이 NOZZLES만 안전하고 빠르게 교체하여 SUPRAGINGIVAL & SUBGINGIVAL에 편리하게 적용할 수 있습니다.

(Only Mectron Combi touch)

- 360° 회전 가능
- AUTOCLAVE 멸균 가능



▶ 500 ML BOTTLE

다른 액체류 사용 가능
(EX) CHLORHEXIDINE IN PERIO OR SODIUM
HYPOCHLORITE IN ENDO



▶ 2 REMOVABLE POWDER CHAMBERS

리필 기능으로 쉽게 POWDER CHAMBERS 분리 가능


- 독립형 PROPHY & PERIO POWDER CHAMBERS
- 투명한 챔버캡 적용으로 파우더 모니터링 가능
- 안전을 위한 푸시 버튼 적용
- 챔버 내 가압은 오직 풋 페달을 밟을때만 동작
- 챔버 내 파우더 부족 시, 자동 멈춤 기능
(내부에 파우더 레벨 인식 스티커 부착되어 있음)



▶ SUBGINGIVAL PERIO TIP

특수 제작된 일회용 멸균 팁, 손으로 간단하게 부착 가능

- 5mm의 깊은 포켓까지 접근성 제공

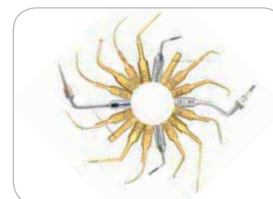

▶ WIDE RANGE OF TREATMENTS

SCALING, PERIO, ENDO 및 RESTORATIVE TREATMENT를 위해 50개 이상의 초음파 INSERTS 사용 가능



▶ PULSE MODE

MECTRON만의 특허받은 기술로 PROSTHETICS과 EXTRACTIONS을 위한 최적화된 초음파 스케일러 모드 제공



▶ SCALING INSERT

S1-S



▶ PERIO INSERT

P-10

→ AIR POLISHING TECHNIQUE

미세한 파우더 분사

고속으로 분사되는 파우더가 따뜻한 응축 스프레이와 만나 아주 정밀하고 안정적인 JETTING을 만들어 냅니다.




JETTING 효과

JETTING된 스프레이는 치면에 침착된 색소를 효과적으로 제거하고 RUBBER CUP과 POLISHING PASTE를 사용할 때 보다 훨씬 부드럽고 빠른 시술이 가능합니다. 특히 치간 사이 시술 시, 효과의 월등한 차이를 나타냅니다.



120° SPRAY HEAD

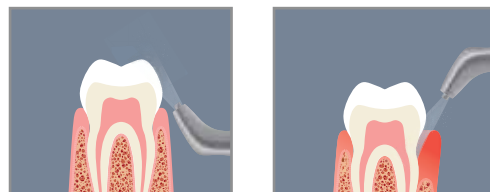

SUPRAGINGIVAL AND SUBGINGIVAL
POWDERS : SODIUM BICARBONATE / CALCIUM CARBONATE

90° SPRAY HEAD



SUPRAGINGIVAL AND OCCLUSAL SURFACES
POWDERS : SODIUM BICARBONATE / CALCIUM CARBONATE

PERIO SPRAY HEAD WITH SUBGINGIVAL PERIO TIP



SUBGINGIVAL TREATMENT (POCKETS > 5 mm)
POWDERS : CALCIUM CARBONATE



서울시 금천구 가산디지털1로 2 우림라이온스밸리2차 305호



02-334-2815



www.mdsafe.co.kr



www.mdsafemall.co.kr